



## Opmeten van de juiste maat Oval-8 vingerspalk

Deze handleiding helpt om de juiste maat Oval-8 te bepalen voor uw vinger(s). Omdat de dikte van de vinger echter flink kan variëren door zwelling en temperatuurverschillen geeft één maat geen 100% garantie voor een goede pasvorm. Wij adviseren om naast de gemeten maat ook één maat kleiner en één maat groter te bestellen, zodat u altijd een passende Oval-8 vingerspalk tot uw beschikking heeft.



## Instructies

Om de meetstrip te gebruiken heeft u een schaar en een liniaal nodig. Knip onderstaande meetstrip uit en volg de verdere instructies. Als knippen moeilijk voor u is, vraag dan iemand om u hierbij te helpen.




Het midden van het aangedane gewricht moet gelijk zijn met dit lijntje.







## Instructies

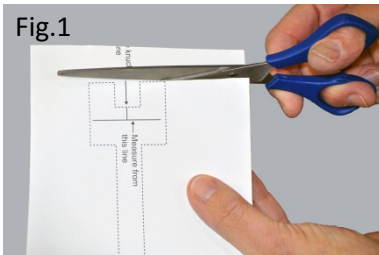


Knip de meetstrip uit langs de stippellijn.

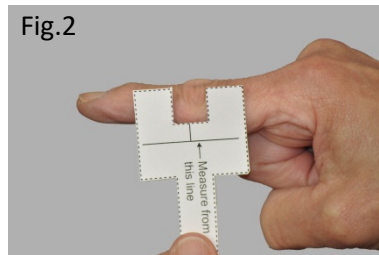


Plaats het streepje in de uitsparing in het midden van **het aangedane gewricht**.

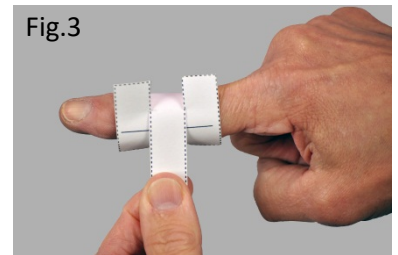


Wikkel de strip om de vinger door de uitsparing tot het de meetlijn overlapt.

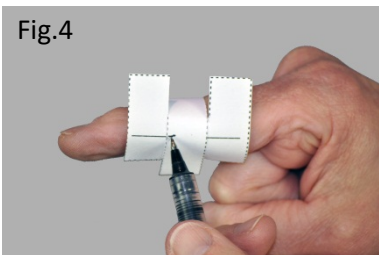


Trek **lichtjes** aan de strip, zodat het papier glad om het gewricht ligt. Trek een lijn op de strip waar het de meetlijn overlapt.

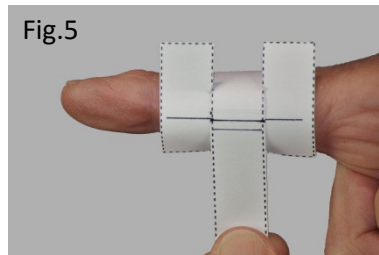

Trek de strip nu **steviger** rond het gewricht voor een strakke pasvorm en trek een tweede lijn op de strip waar het de meetlijn overlapt.

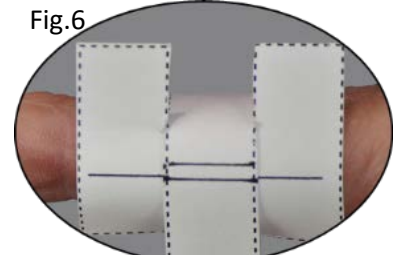

Het wordt geadviseerd om de strip op twee plaatsen te markeren, om zo wat speling te hebben voor een juiste pasvorm.

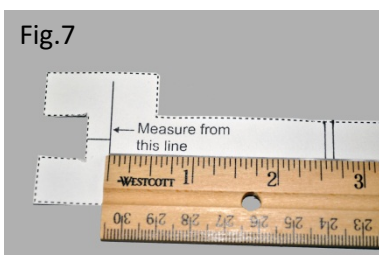

Meet met een liniaal de afstand tussen de meetlijn en uw markeringen.



Zoek in de tabel op pagina 3 de juiste maat bij de afstand die u heeft gemeten. Ons advies is om deze maat, één maat kleiner en één maat groter te bestellen.

*\*Het gebruik van de meetstrip is geen garantie voor een juiste maatbepaling. Temperatuur en zwelling kunnen de gemeten maat beïnvloeden.*



## Tabel maatbepaling Oval-8

Oval-8 maat	Gemeten lengte	Oval-8 maat	Gemeten lengte	Oval-8 maat	Gemeten lengte	Oval-8 maat	Gemeten lengte	Oval-8 maat	Gemeten lengte
2	4,3 cm	5	5,3 cm	8	6,1 cm	11	7,1 cm	14	8,0 cm
3	4,5 cm	6	5,7 cm	9	6,4 cm	12	7,4 cm	15	8,2 cm
4	4,9 cm	7	5,9 cm	10	6,8 cm	13	7,7 cm		

### Bestellen

U kunt de Oval-8 vingerspalken eenvoudig bestellen in onze webshop op

[www.medimast.nl](http://www.medimast.nl)